


## AVANT




Mouchez-vous et lavez-vous les mains avec du savon

## Comment utiliser Les tests BD Veritor™

# 1 PRÉLÈVEMENT

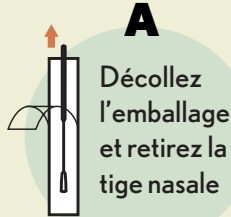


**A**  
Décollez l'emballage et retirez la tige nasale

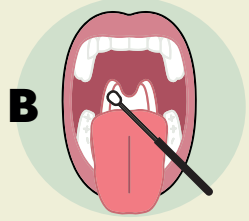

Insérer la tige dans la partie supérieure de la gorge et des amygdales

Frotter la tige nasale contre la partie supérieure du fond de la gorge. **Éviter la langue, les dents et les gencives.**

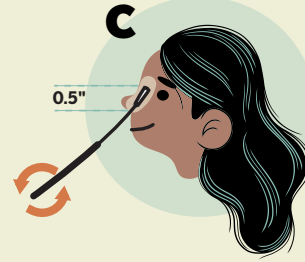


Insérer la même tige nasale jusqu'à **0,5 po** à l'intérieur de la narine. Tournez **5 fois dans chaque narine** et laissez la tige en place pendant **10 secondes**; gauche et droite.


# 2 PRÉPARATION



Retirez le capuchon du tube et insérez l'écouvillon nasal

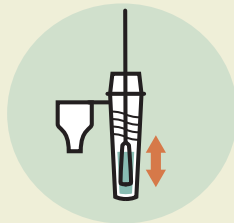

Remuez l'écouvillon de haut en bas pendant **15 secondes**

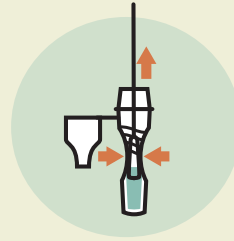


Pincez légèrement le tube pour extraire le liquide en retirant l'écouvillon





Remplacez le capuchon fermement sur le tube

# 3 DÉPISTAGE

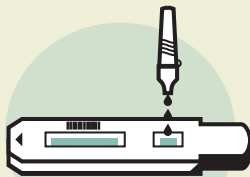


Ajoutez **3 gouttes** dans la cupule sur la bande d'échantillon du test

Attendez **15 min.**  
Voici l'exemple d'un test positif et d'un test négatif.

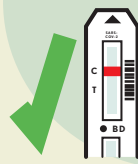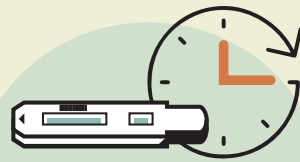

**NÉGATIF**

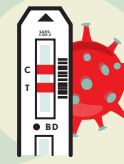

**POSITIF**

\* Si votre test rapide est **NÉGATIF**, vous devez effectuer un **2e test** **48 h plus tard**

☀ Si vous êtes **POSITIF**, veuillez téléphoner à la ligne Info-Covid : **1-888-662-7482**